



# Keramik. Eine Klasse für sich.

TruKlear®, das erste vollästhetische Bracket  
ohne Metall und seine schönsten Alternativen.



Ihr Anspruch ist der höchste.  
Ein Grund mehr für uns,  
das Beste zu geben.

*Wir von FORESTADENT stellen uns immer wieder Herausforderungen, um unsere eigenen hohen Ansprüche zu erfüllen. Herausgekommen ist nach einer langen Zeit intensiver Entwicklung ein besonderes, vollästhetisches Bracket, das gänzlich ohne Metall auskommt. Ein Stern am Himmel der Ästhetik, ein Meilenstein der Perfektion.*

*TruKlear® rundet damit eine Linie ab, die wir seit Jahren konsequent verfolgen: Ihnen für Ihre anspruchsvollsten Patienten die Brackets zu bieten, mit denen sie nicht nur schnell und komfortabel, sondern vor allem schön zu einem perfekten, natürlichen Lächeln kommen. Lassen Sie sich also überraschen, wie TruKlear® alle Bedürfnisse nach Ästhetik erfüllt und wie Sie alternativ auch mit unseren bewährten Keramikbrackets*

*Quicklear® und GLAM® Ihre Patienten mit dem Besten verwöhnen.*







Edel. Einzigartig. Metallfrei.  
TruKlear® – macht Ästhetik vollkommen.

*Höchste Ansprüche an Ästhetik können Sie jetzt perfekt erfüllen. Denn von FORESTADENT gibt es das weltweit erste SL Bracket mit Keramikkorpus und -verschluss, das gänzlich ohne Metall auskommt. So passt sich TruKlear® mit seiner transluzenten Optik optimal der Zahnfarbe an und kein einziges Metallteil fällt unangenehm auf. Neben dem besonderen Aussehen profitieren Ihre Patienten natürlich auch von der außergewöhnlichen Leistungsfähigkeit des Brackets: Seine Bauweise gewährleistet eine gute Übertragung von Torque und Rotation. Selbstligierend macht es Ihnen die Handhabung leicht und schnell, um hier nur einige Vorteile zu nennen. Der schönste Grund für TruKlear® ist auf jeden Fall sofort klar: Ästhetischer kann man nicht zu einem perfekten Lächeln kommen. Ihre Patienten sind Ihnen das sicher wert.*

# TruKlear®. Rundum nur Vorteile.

Korpus aus transluzenter Keramik mit abgerundeten Kanten für hohen Tragekomfort


Slotseitig breiter Verschlusschieber aus verfärbungsfreier Keramik für gute Rotationskontrolle

Abgerundete Slotenläufe und vier Kontaktrippen im Slot reduzieren Klemm- und Kerbeffekte

Metallfreier Haltemechanismus für den Schieber – für optimale Ästhetik, auch bei Nickelunverträglichkeit

Vierwandslot ist besonders niedrig gestaltet, um Bögen mit der Höhe 0,025" eng zu führen, für eine gute Übertragung von Torque und Rotation

Inverse Hakenbasis sorgt für optimale mechanische Retention und reduziert die Gefahr von Schmelzausrissen

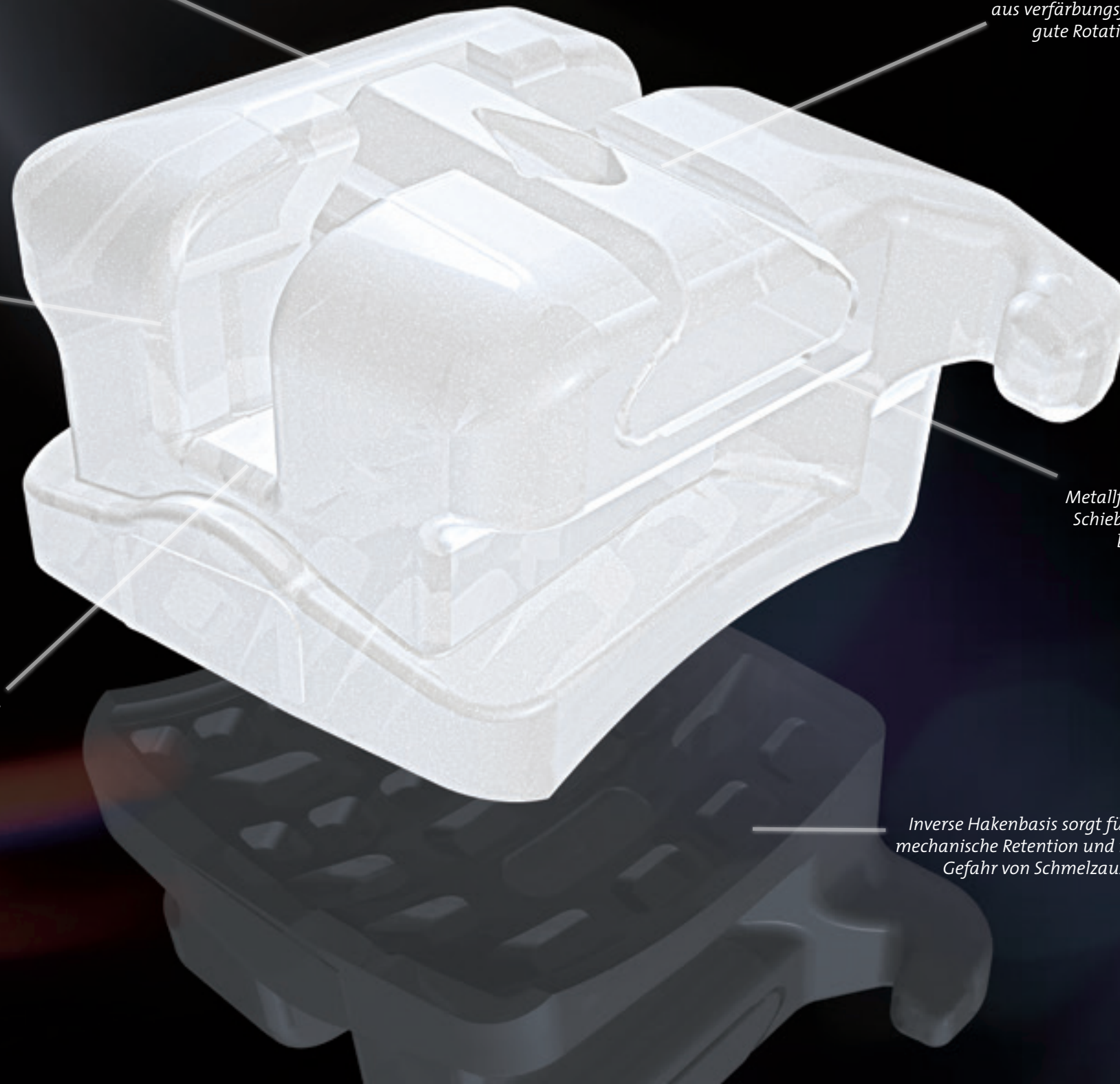





## Je besser die Kombination, desto schöner das Ergebnis.

So führen Bukkal- und Lingualbrackets gemeinsam zum Erfolg.



Unser neues Keramik-Highlight TruKlear® ist aktuell nur für den Oberkiefer erhältlich. Es gibt jedoch einige geschickte Möglichkeiten, TruKlear® mit anderen Brackets zu kombinieren: entweder mit Bukkalbrackets wie GLAM®, QuickKlear® und BioQuick® LP oder mit Lingualbrackets. Insbesondere bei Patienten mit Tiefbiss besteht die Gefahr, dass die Zähne des Oberkiefers auf die Brackets im Unterkiefer aufbeißen. Da Keramik härter ist, kann dies im schlimmsten Fall zu Beschädigungen des Zahnschmelzes führen. Deshalb empfiehlt es sich in diesem Fall, Bukkalbrackets im Oberkiefer mit Lingualbrackets im Unterkiefer zu kombinieren. Die Kombination zweier völlig unterschiedlicher Techniken bietet aber noch weitere Vorteile:

- Brackets können ohne Kompromisse interferenzfrei geklebt werden, ohne dass bissöffnende Apparaturen nötig sind.
- Sie ermöglicht eine sehr inzisale Positionierung der Unterkieferfront für schnelle und effektive Nivellierung.
- Lingualbrackets lassen sich in optimaler Lage zum Widerstandszentrum des Zahns positionieren, was protrusive Momente vermeidet.
- Die Behandlung im Unterkiefer kann beginnen, ohne dass die Nivellierungsphase im Oberkiefer abgeschlossen sein muss.



Für diese sinnvolle Kombination bietet sich optimal unser 2D Lingual Bracket an. Sie und Ihre Patienten profitieren durch seine Vorteile:

- Flachstes Bracket auf dem Markt (nur 1,3 bis 1,65 mm hoch) für hohen Patientenkomfort.
- Selbstligierend für einfaches Handling.
- Der Einsatz von 2D Lingual erfolgt direkt aus dem Bestand der Praxis – das Bracket muss nicht individuell gefertigt werden.
- Geübte Behandler können alle nötigen Arbeitsschritte selbst, ohne externen Aufwand, durchführen.
- Doppelflügel für gute Übertragung von Angulation und Rotation.
- Viele unterschiedliche Varianten.



MiniAnts® – besonders schmal zum frühzeitigen Einsatz auch bei ausgeprägtem Engstand



2D Plus mit partiellem Vierkantslot zum Torquieren von Einzelzähnen



2D mit T-Haken – für den Einsatz von Elastikketten



## So viel Ästhetik gab es einfach noch nie.

TruKlear® überzeugt auf ganzer Linie.



- **Vollästhetisch:** Das erste Bracket von FORESTADENT mit Keramikkorpus und Keramikschieber.



- **Absolut metallfrei:** Nichts stört die Ästhetik und das Bracket ist natürlich auch für Nickelallergiker geeignet.

- **Breiter Verschluss:** Der Schieber ist slotseitig besonders breit gestaltet für eine gute Übertragung von Rotation.



- **Sicher sauber:** Der Schieber öffnet nach gingival, das schützt den Verschluss vor Beschädigungen beim Kauen und vor der Einlagerung von Speiseresten.

- **Niedriger Slot:** Bögen mit der Höhe 0.025" werden eng geführt. So ist eine gute Übertragung von Torque gewährleistet.



- **Translucent:** Passt sich optimal der Zahnfarbe an und verfärbt sich nicht.

- **Selbstligierend:** Als selbstligierendes Bracket garantiert TruKlear® eine einfache und schnelle Handhabung.

- **Patentiert:** TruKlear® verfügt über die von uns entwickelte und patentierte inverse Hakenbasis, die auf der Untersuchung der natürlichen Wölbung von über 4.000 Zähnen aus der ganzen Welt beruht.

- **Optimale Retention:** Die inverse Hakenbasis gewährleistet eine optimale mechanische Retention.

- **Niedrige Friktion:** Verrundete Slotenläufe minimieren Reibung, vier Kontaktrippen im Slot vermeiden Klemm- und Kerbeeffekte.

- **Splitter- und bruchfrei zu entfernen:** Das spezielle Pauls-Tool macht es einfach.

- **100 % Made in Germany:** Vertrauen Sie unserem hohen Qualitätsanspruch.

TruKlear® ist momentan für den Oberkiefer 5-5 erhältlich. Im Unterkiefer lässt es sich auf vier Arten ergänzen:

1. BioQuick® LP: als vollständig selbstligierende Variante mit Metallbrackets im Unterkiefer
2. QuickKlear®: als vollständig selbstligierende Variante in Keramik
3. GLAM®: für die beste Ästhetik
4. 2D Lingual: verhindert Aufbiss



## Ganz schön unauffällig. So wird man noch attraktiver.

QuickKlear® Brackets bringen schön schnell Erfolge.



In der Reihe unserer Keramikbrackets haben Sie mit QuickKlear® die aktive, selbstligierende Variante mit flexibler Metallklammer. QuickKlear® ist dabei komfortabel in der Handhabung und ermöglicht dank breitem und interaktivem Clip eine besonders hohe Angulations-, Rotations- und Torque-Kontrolle. Angenehm für Sie und Ihre Patienten, die sich mit dem transluzenten Äußeren sicher noch besser fühlen und damit auch noch besser ankommen. Kein Grund also, sich unauffällig im Hintergrund zu halten.

- **Transluzente Keramik:** von uns entwickelt, für Ihre Patienten weniger auffällig.

- **Unauffällig auch die Klammer:** Der Chrom-Cobalt-Clip schimmert dank einer speziellen Oberflächenbehandlung matt, statt auffällig zu glänzen.

- **Einfach komfortabel:** Einfaches Öffnen und Schließen der Verschlussklammer macht die Anwendung völlig unkompliziert.

- **Starker Halt:** Mit der von uns entwickelten und für Keramikbrackets invertierten Hakenbasis haftet QuickKlear® rein mechanisch und absolut exzellent am Zahn.

- **Optimale Passform:** Anhand der Untersuchung der natürlichen Wölbung von über 4.000 Zähnen auf der ganzen Welt wurde die Basis des Brackets so angepasst, dass es optimal auf alle Zahnformen passt.

- **Gut einsetzbar:** Verfügbar ist QuickKlear® für OK 5-5 und UK 3-3.

- **Leicht zu entfernen:** Mit dem speziellen Pauls-Tool kann das Bracket sicher und splitterfrei abgenommen werden.

- **Effektiv kombinierbar:** Das Bracket lässt sich problemlos mit BioQuick® LP kombinieren.



# Kann man auch ohne Glamour beeindrucken?

Natürlich mit GLAM®.



*Jederzeit gut aussehen ist sicher der Hauptgrund, warum sich viele Patienten für Keramikbrackets entscheiden. GLAM® kann einen da eigentlich nur schwach werden lassen, denn mit seiner extrem transluzenten Keramik wird die Zahnfarbe optimal adaptiert. Dabei schimmert es ganz sanft matt ohne Lichtreflexe und wirkt noch dezenter. Auch die minimalistisch gestaltete Basis erzeugt wenige Lichtbrüche und macht das konventionell ligierbare Bracket besonders durchsichtig. So entspricht es noch höheren Ansprüchen an absolute Ästhetik. Die Slotenläufe und -kanten sind abgerundet und sorgen für weniger Friktion. Und auch das Debonding kostet Sie wenig Zeit und keine Nerven. Denn mit dem Pauls-Tool ist es in einem Schritt und ohne zu splintern oder zu brechen einfach entfernt. Kann Glamour wirklich so schön sein? Na klar, mit GLAM®.*


- *Hochästhetisch: Extrem transluzent adaptieren die Brackets optimal die Zahnfarbe.*
- *Noch schöner: Schimmert matt, statt Licht zu reflektieren. Auch mit nasser Oberfläche.*
- *Konventionell ligierbar: Bewährt und vertraut – macht das Bracket außerdem noch unauffälliger und dezenter.*
- *Aus einem Stück: Klinische Kräfte werden ohne Torqueverlust effektiv und präzise vom Slot zur Basis übertragen.*
- *Nichts verfärbt sich: Enthält keinerlei Kunststoffteile.*
- *Einfaches Debonding: Mit dem Pauls-Tool werden die Brackets sicher splitter- und bruchfrei entfernt.*
- *Gut einsetzbar: Das Bracket ist für OK und UK je 5–5 verfügbar.*





# Leicht anzubringen. Leicht zu entfernen.


Unsere Tools machen alles einfacher.

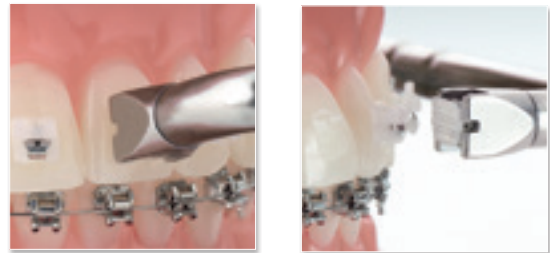

Das Pauls-Tool für splitterfreies Debonding



QuicKlear® Brackets können von gingival und von vestibulär geöffnet werden. Die Klammer bewegt sich dabei okklusal

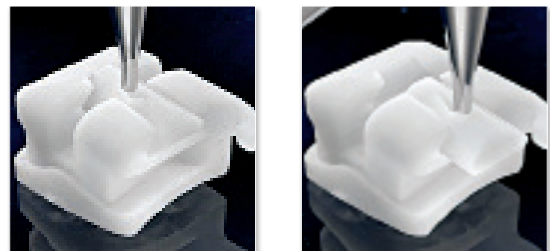

TruKlear® Brackets werden von vestibulär geöffnet. Der Schieber wird nach gingival aufgeschoben

*TruKlear®, QuicKlear® und GLAM® haben viele gemeinsame Vorteile. Sie sind leicht anzubringen und lassen Ihre Patienten schnell und vor allem höchstethisch zu einem schönen Lächeln kommen. Und sie lassen sich ebenso leicht wieder entfernen. Mit dem Pauls-Tool. Dieses besondere Werkzeug – nur von uns gebaut – wird einfach angesetzt und mit einer mesialen bzw. distalen Kippbewegung genutzt. Ohne die kostbaren Brackets oder den noch wertvolleren Zahnschmelz zu beschädigen. Kein Splittern, kein Brechen. Am Ende der Behandlung oder wenn Sie zwischendurch einmal repositionieren müssen: Pauls-Tool ansetzen, Bracket entfernen, sandstrahlen, neu kleben. Das war's. Einfacher und sicherer geht es wirklich nicht.*


*Auch das Öffnen machen wir Ihnen mit unserem Tool besonders leicht. TruKlear® und QuicKlear® lassen sich als selbstligierende Brackets mit einem klassischen Öffnungsinstrument leicht öffnen.*







## Die schönsten Brackets verdienen auch die schönsten Bögen. Zahnfarben und dauerhaft weiß: unsere BioCosmetic® Bögen.

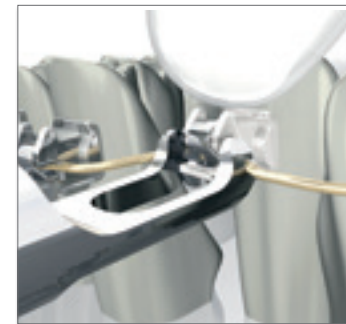

*Wenn Sie bei Ihren Patienten besonders hochwertige Brackets nutzen, sollte es eigentlich selbstverständlich sein, auch besonders hochwertige Bögen einzusetzen. Für die ästhetischen Brackets sind das bei FORESTADENT BioCosmetic® Bögen.*

*Ihr Kern besteht aus NiTi, der intelligenten Nickel-Titanium-Legierung, die die Bögen besonders formbeständig und superelastisch macht. Dadurch sind sie effektiv in der Anwendung und sanft im Tragekomfort.*

*Für Ihre Patienten noch angenehmer ist die Thermosensibilität der BioBögen. Denn sie können sich ab und zu durch kalte Speisen oder Getränke eine kleine Spannungspause gönnen.*

*Die zahnfarbene Ummantelung aus medizinischem Teflon lässt sie einerseits sehr unauffällig erscheinen, andererseits sorgt diese für niedrige Reibung. Außerdem ist Teflon hydrophob und nimmt keine Verfärbungen von Speisen und Getränken an. Verfügbar sind sie als Rund- und Vierkantbögen, damit Sie für Ihre Patienten immer den richtigen Bogen raushaben.*





*Für FORESTADENT sind permanente Investitionen in Forschung und Entwicklung selbstverständlich. Schließlich möchten wir Ihnen und damit auch Ihren Patienten jederzeit Produkte bieten können, die die Behandlung schnell, sicher und angenehm machen. Vertrauen Sie einfach auf unsere jahrzehntelange Expertise und unsere Qualität made in Germany. Denn wir tun alles, um die ganze Welt zum lächeln zu bringen.*





Hiermit bestelle ich  Bitte schicken Sie mir ein Angebot über

\_\_\_\_\_ Fülle Brackets

Oberkiefer  TruKlear® (5-5)  
 QuicKlear® (5-5)  
 GLAM® (5-5)

Slot .018"  Slot .022"  
 Roth  McLaughlin/Bennett/Trevisi  
 Haken 3  Haken 3-5 (nicht bei TruKlear)

Unterkiefer  QuicKlear® (3-3) + BioQuick® (4-5)  
 BioQuick® (5-5)  
 GLAM® (5-5)

Bestellmenge hier eintragen		
		<b>Klassisches Öffnungswerkzeug</b> Für alle Brackets der Quick-Familie und TruKlear®, zweiseitig
		<b>Drahtbogen-Direktor</b>
		<b>Keramikbracket-Entfernungszange mit Kerbe</b>
		<b>Pauls-Tool</b> Keramikbracket-Entfernungswerkzeug, zweiseitig

Praxisstempel

## 2D<sup>®</sup> Lingual Brackets – Starter Kits



Hiermit bestelle ich  
 Bitte schicken Sie mir ein Angebot über



Bestellmenge hier eintragen	
	<b>Starter Kit 2D<sup>®</sup> Lingual Brackets mit und ohne T-Haken</b> 2D <sup>®</sup> Lingual Brackets – 5 Fälle (60 mit T-Haken, 40 ohne T-Haken), 1 Modell 2D <sup>®</sup> Lingual Brackets OK + UK
	<b>Starter Kit 2D<sup>®</sup> Lingual-Brackets mit T-Haken</b> 2D <sup>®</sup> Lingual-Brackets – 5 Fälle mit T-Haken. (100 Brackets) , 1 Modell 2D <sup>®</sup> Lingualbrackets OK + UK
	<b>Starter Kit 2D<sup>®</sup> Lingual Brackets gemischt mit langem gingivalem Haken</b> 2D <sup>®</sup> Lingual Brackets – 5 Fälle (40 x 760-1026 Medium Twin, 40 x 760-1126 Medium Twin, 10 x 760-1027 Large Twin, 10 x 760-1028 narrow Twin), 1 Modell 2D <sup>®</sup> Lingual Brackets OK + UK
	<b>ausserdem in allen Kits enthalten:</b> 1 Spezialsonde mit Führungskerbe 1 BioLingual <sup>®</sup> Bogen 0.010" - Shape 2 1 BioLingual <sup>®</sup> Bogen 0.010" - Shape 5 1 BioLingual <sup>®</sup> Bogen 0.012" - Shape 2 1 BioLingual <sup>®</sup> Bogen 0.012" - Shape 3 1 BioLingual <sup>®</sup> Bogen 0.012" - Shape 4 1 BioLingual <sup>®</sup> Bogen 0.012" - Shape 5 1 BioLingual <sup>®</sup> Bogen 0.016" - Shape 2 1 BioLingual <sup>®</sup> Bogen 0.016" - Shape 3 1 BioLingual <sup>®</sup> Bogen 0.016" - Shape 4 1 BioLingual <sup>®</sup> Bogen 0.016" - Shape 5 1 CD Rom 2D <sup>®</sup> Lingual-Brackets Patientenbroschüren Lingual (ca. 25 Stück) Bogenschablone für BioLingual <sup>®</sup> -Bögen

Praxisstempel



*FORESTADENT Bernhard Förster GmbH  
Westliche Karl-Friedrich-Straße 151 · 75172 Pforzheim  
Telefon + 49 7231 459-0 · Fax + 49 7231 459-102  
kundenservice@forestadent.com · www.forestadent.com*